

## NORIKS Bunion Fix — διορθωτής κότσιου

Σταδιακή επαναφορά του μεγάλου δακτύλου με 30 λεπτά έως 3 ώρες την ημέρα.

|            |                                                    |
|------------|----------------------------------------------------|
| Μέγεθος    | Ενιαίο — ταιριάζει σε όλα τα μεγέθη ποδιού         |
| Πλευρά     | Ο ίδιος διορθωτής για αριστερό και δεξί πόδι       |
| Επένδυση   | Μαλακή εσωτερική επένδυση που προστατεύει το δέρμα |
| Ρύθμιση    | Ελαστικοί ιμάντες με ρυθμιζόμενη τάση              |
| Συνιστάται | Από 30 λεπτά έως 3 ώρες την ημέρα                  |



### ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- 1 διορθωτής κότσιου
- Ελαστικοί ιμάντες ρύθμισης


### ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

1. Τοποθετήστε τον διορθωτή ώστε το μαξιλαράκι να ακουμπά στο προεξέχον οστό και η θηλιά να περιβάλλει το μεγάλο δάκτυλο.
2. Σφίξτε τον ιμάντα μόνο όσο χρειάζεται για να νιώσετε ήπιο τέντωμα — ποτέ μέχρι πόνου.
3. Την πρώτη εβδομάδα φορέστε τον 30 λεπτά την ημέρα και μετά αυξάνετε σταδιακά.

### 1. Τοποθέτηση

- 1 Καθίστε και στηρίξτε το πέλμα ώστε τα δάχτυλα να είναι χαλαρά.
- 2 Περάστε το μεγάλο δάκτυλο μέσα από τη θηλιά μέχρι το μαξιλαράκι να ακουμπήσει στο προεξέχον οστό στο πλάι του ποδιού.
- 3 Περάστε τον ιμάντα γύρω από το μέσο του πέλματος και σφίξτε τον μόνο όσο χρειάζεται για να νιώσετε ήπιο τέντωμα.
- 4 Ελέγξτε ότι το μαξιλαράκι εφάπτεται επίπεδα, χωρίς πτυχές, και ότι ο ιμάντας δεν πιέζει το πάνω μέρος του πέλματος.
- 5 Το μεγάλο δάκτυλο πρέπει να τραβιέται προς τα έξω, αλλά χωρίς τάση που προκαλεί πόνο.

## Udobno, prilagodljivo i lako za nošenje kod kuće

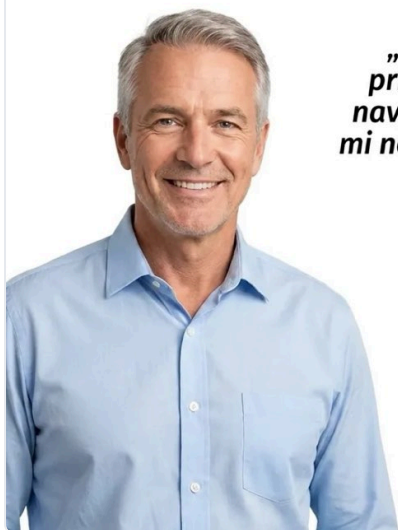

*„Mekan je i lako se prilagodi. Stavim ga navečer uz TV i uopće mi ne smeta — zato ga nosim redovno.“*

**Marko Horvat**  
Korisnik Noriks Bunion Fixa



Ο διορθωτής περιβάλλει το μεγάλο δάκτυλο και αποφορτίζει το προεξέχον οστό.

## Zašto je Noriks drugačiji:



Στόχος είναι η σταδιακή επαναφορά του δακτύλου σε πιο σωστή θέση.

## 2. Πρόγραμμα χρήσης

| Περίοδος            | Ημερησίως     | Πότε                                          |
|---------------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 1η εβδομάδα         | 30 λεπτά      | Το βράδυ, καθιστοί                            |
| 2η εβδομάδα         | 45 – 60 λεπτά | Το βράδυ ή στην ξεκούραση                     |
| 3η εβδομάδα         | 1 – 2 ώρες    | Χωρισμένο σε δύο διαστήματα                   |
| Από την 4η εβδομάδα | 2 – 3 ώρες    | Σε ένα ή δύο διαστήματα, ανάλογα με την άνεση |

Η συνέπεια μετράει περισσότερο από τη διάρκεια. Τριάντα λεπτά κάθε μέρα δίνουν καλύτερο αποτέλεσμα από τρεις ώρες μία φορά την εβδομάδα.

## 3. Τι να περιμένετε

- Πρώτες ημέρες: αίσθημα τεντώματος και ανακούφισης μετά την αφαίρεση του διορθωτή.
- Μετά από περίπου δύο εβδομάδες συνεπούς χρήσης: λιγότερη ενόχληση στο περπάτημα και στην ορθοστασία.
- Μετά από περίπου έναν μήνα: πιο ορατή αλλαγή στη θέση του δακτύλου.
- Ο διορθωτής δρα όσο τον φοράτε και με τακτική χρήση — δεν είναι λύση μιας φοράς.

## 4. Επίλυση προβλημάτων

| Τι συμβαίνει                         | Αιτία                                        | Λύση                                                                 |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Πόνος κατά τη χρήση                  | Ο ιμάντας είναι πολύ σφιγμένος               | Χαλαρώστε τον ιμάντα· το αίσθημα πρέπει να είναι τέντωμα, ποτέ πόνος |
| Ο διορθωτής γλιστράει από το δάκτυλο | Ο ιμάντας είναι πολύ χαλαρός ή το δέρμα υγρό | Στεγνώστε το πέλμα και σφίξτε τον ιμάντα κατά ένα βήμα               |

| Τι συμβαίνει         | Αιτία                                                       | Λύση                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Ερυθρότητα στο δέρμα | Πτυχή στην επένδυση ή πολύ μεγάλη διάρκεια χρήσης στην αρχή | Ισιώστε την επένδυση και μειώστε τον χρόνο χρήσης στα 30 λεπτά |

## 5. Καθαρισμός

- Σκουπίστε με υγρό πανί και ήπιο σαπούνι, ξεπλύνετε και αφήστε να στεγνώσει στον αέρα.
- Μην πλένετε στο πλυντήριο και μη στεγνώνετε σε καλοριφέρ — το λάστιχο χάνει την τάση του.

Μη φοράτε τον διορθωτή πάνω από ανοιχτό τραύμα ή ερεθισμένο δέρμα. Σε διαβήτη, μειωμένη αίσθηση στο πόδι ή έντονο, επίμονο πόνο συμβουλευτείτε πρώτα γιατρό.

## 6. Εγγύηση, αλλαγή και επιστροφή

- Επιστροφή ή αλλαγή μπορείτε να ζητήσετε εντός 30 ημερών από την παράδοση.
- Το προϊόν πρέπει να είναι αχρησιμοποίητο, άπλυτο και στην αρχική συσκευασία, με την απόδειξη.
- Τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν τον πελάτη — εκτός αν το προϊόν έφτασε χαλασμένο ή στάλθηκε λάθος είδος.
- Την επιστροφή χρημάτων κάνουμε σε PayPal ή IBAN, εντός 3 έως 5 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του δέματος.
- Για επιστροφή ή αλλαγή γράψτε στο [info@noriks.com](mailto:info@noriks.com) και αναφέρετε τον αριθμό παραγγελίας.

Αν το προϊόν φτάσει χαλασμένο ή με ελάττωμα κατασκευής, ενημερώστε μας αμέσως — τέτοια περίπτωση τη λύνουμε χωρίς κόστος για εσάς.

Το Bunion Fix είναι καθημερινή στήριξη, όχι ιατρική θεραπεία. Δεν θέτει διάγνωση και δεν αντικαθιστά τη συμβουλή γιατρού. Αν οι ενοχλήσεις επιμένουν, εντείνονται ή εμφανιστούν μετά από τραυματισμό, απευθυνθείτε σε γιατρό.