

NORIKS Bunion Fix — διορθωτής κότσιου

Σταδιακή επαναφορά του μεγάλου δακτύλου με 30 λεπτά έως 3 ώρες την ημέρα.

Μέγεθος	Ενιαίο — ταιριάζει σε όλα τα μεγέθη ποδιού
Πλευρά	Ο ίδιος διορθωτής για αριστερό και δεξί πόδι
Επένδυση	Μαλακή εσωτερική επένδυση που προστατεύει το δέρμα
Ρύθμιση	Ελαστικοί ιμάντες με ρυθμιζόμενη τάση
Συνιστάται	Από 30 λεπτά έως 3 ώρες την ημέρα



ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- 1 διορθωτής κότσιου
- Ελαστικοί ιμάντες ρύθμισης


ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

1. Τοποθετήστε τον διορθωτή ώστε το μαξιλαράκι να ακουμπά στο προεξέχον οστό και η θηλιά να περιβάλλει το μεγάλο δάκτυλο.
2. Σφίξτε τον ιμάντα μόνο όσο χρειάζεται για να νιώσετε ήπιο τέντωμα — ποτέ μέχρι πόνου.
3. Την πρώτη εβδομάδα φορέστε τον 30 λεπτά την ημέρα και μετά αυξάνετε σταδιακά.

1. Τοποθέτηση

- 1 Καθίστε και στηρίξτε το πέλμα ώστε τα δάχτυλα να είναι χαλαρά.
- 2 Περάστε το μεγάλο δάκτυλο μέσα από τη θηλιά μέχρι το μαξιλαράκι να ακουμπήσει στο προεξέχον οστό στο πλάι του ποδιού.
- 3 Περάστε τον ιμάντα γύρω από το μέσο του πέλματος και σφίξτε τον μόνο όσο χρειάζεται για να νιώσετε ήπιο τέντωμα.
- 4 Ελέγξτε ότι το μαξιλαράκι εφάπτεται επίπεδα, χωρίς πτυχές, και ότι ο ιμάντας δεν πιέζει το πάνω μέρος του πέλματος.
- 5 Το μεγάλο δάκτυλο πρέπει να τραβιέται προς τα έξω, αλλά χωρίς τάση που προκαλεί πόνο.

Udobno, prilagodljivo i lako za nošenje kod kuće

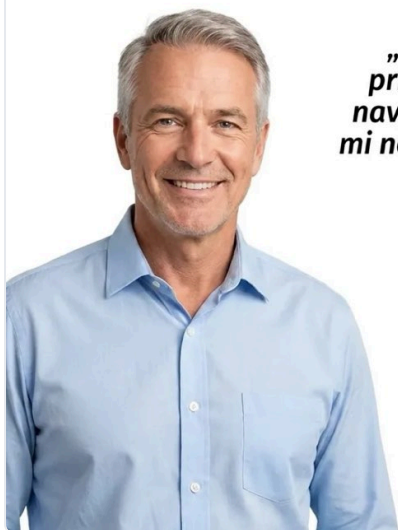

„Mekan je i lako se prilagodi. Stavim ga navečer uz TV i uopće mi ne smeta — zato ga nosim redovno.“

Marko Horvat
Korisnik Noriks Bunion Fixa



Ο διορθωτής περιβάλλει το μεγάλο δάκτυλο και αποφορτίζει το προεξέχον οστό.

Zašto je Noriks drugačiji:



Στόχος είναι η σταδιακή επαναφορά του δακτύλου σε πιο σωστή θέση.

2. Πρόγραμμα χρήσης

Περίοδος	Ημερησίως	Πότε
1η εβδομάδα	30 minuta	Το βράδυ, καθιστοί
2η εβδομάδα	45 – 60 minuta	Το βράδυ ή στην ξεκούραση
3η εβδομάδα	1 – 2 ώρες	Χωρισμένο σε δύο διαστήματα
Από την 4η εβδομάδα	2 – 3 ώρες	Σε ένα ή δύο διαστήματα, ανάλογα με την άνεση

Η συνέπεια μετράει περισσότερο από τη διάρκεια. Τριάντα λεπτά κάθε μέρα δίνουν καλύτερο αποτέλεσμα από τρεις ώρες μία φορά την εβδομάδα.

3. Τι να περιμένετε

- Πρώτες ημέρες: αίσθημα τεντώματος και ανακούφισης μετά την αφαίρεση του διορθωτή.
- Μετά από περίπου δύο εβδομάδες συνεπούς χρήσης: λιγότερη ενόχληση στο περπάτημα και στην ορθοστασία.
- Μετά από περίπου έναν μήνα: πιο ορατή αλλαγή στη θέση του δακτύλου.
- Ο διορθωτής δρα όσο τον φοράτε και με τακτική χρήση — δεν είναι λύση μιας φοράς.

4. Επίλυση προβλημάτων

Τι συμβαίνει	Αιτία	Λύση
Πόνος κατά τη χρήση	Ο ιμάντας είναι πολύ σφιγμένος	Χαλαρώστε τον ιμάντα· το αίσθημα πρέπει να είναι τέντωμα, ποτέ πόνος
Ο διορθωτής γλιστράει από το δάκτυλο	Ο ιμάντας είναι πολύ χαλαρός ή το δέρμα υγρό	Στεγνώστε το πέλμα και σφίξτε τον ιμάντα κατά ένα βήμα

Τι συμβαίνει	Αιτία	Λύση
Ερυθρότητα στο δέρμα	Πτυχή στην επένδυση ή πολύ μεγάλη διάρκεια χρήσης στην αρχή	Ισιώστε την επένδυση και μειώστε τον χρόνο χρήσης στα 30 λεπτά

5. Καθαρισμός

- Σκουπίστε με υγρό πανί και ήπιο σαπούνι, ξεπλύνετε και αφήστε να στεγνώσει στον αέρα.
- Μην πλένετε στο πλυντήριο και μη στεγνώνετε σε καλοριφέρ — το λάστιχο χάνει την τάση του.

Μη φοράτε τον διορθωτή πάνω από ανοιχτό τραύμα ή ερεθισμένο δέρμα. Σε διαβήτη, μειωμένη αίσθηση στο πόδι ή έντονο, επίμονο πόνο συμβουλευτείτε πρώτα γιατρό.

6. Εγγύηση, αλλαγή και επιστροφή

- 30 ημέρες για επιστροφή χρημάτων — στείλτε το προϊόν στην κατάσταση που το παραλάβατε.
- Δωρεάν αλλαγή μεγέθους εντός 90 ημερών. Αρκεί ένα e-mail, χωρίς χαρτούρα.
- Για αλλαγή ή επιστροφή γράψτε στο info@noriks.com και αναφέρετε τον αριθμό παραγγελίας.

NORIKS · Οι οδηγίες ισχύουν για το προϊόν που αναφέρεται στον τίτλο αυτού του εγγράφου. Ερωτήσεις και αλλαγή μεγέθους: info@noriks.com · noriks.com/gr