

NORIKS KneeFix — ορθοπεδικός νάρθηκας γόνατος

Ρυθμιζόμενη συμπίεση, πλαϊνοί σταθεροποιητές και μαξιλαράκι γέλης για την επιγονατίδα.

Συμπίεση	Ρυθμιζόμενη με τροχό, χωρίς να βγάλετε τον νάρθηκα
Σταθεροποίηση	Δύο πλαϊνοί σταθεροποιητές
Μαξιλαράκι	Μαξιλαράκι γέλης που περιβάλλει την επιγονατίδα
Πρόσφυση	Αντιολισθητικό λάστιχο σιλικόνης
Μεγέθη	S/M – 2XL ανάλογα με το σωματικό βάρος· ξεχωριστή έκδοση για αριστερό και δεξί γόνατο



ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- 1 νάρθηκας γόνατος (ένδειξη L = αριστερό, R = δεξί)

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

1. Ελέγξτε την ένδειξη για αριστερό ή δεξί γόνατο.
2. Χαλαρώστε τελείως τον τροχό και περάστε τον νάρθηκα σαν κάλτσα.
3. Ευθυγραμμίστε το άνοιγμα γύρω από την επιγονατίδα και σφίξτε σταδιακά τη συμπίεση.

1. Επιλογή μεγέθους

Μέγεθος	Σωματικό βάρος
S/M	50 – 75 kg
L	75 – 90 kg
XL	90 – 110 kg
2XL	110 – 130 kg

Ο νάρθηκας κατασκευάζεται ξεχωριστά για αριστερό και δεξί γόνατο. Πριν τον φορέσετε ελέγξτε την ένδειξη — φορεμένος ανάποδα δεν κρατά τους σταθεροποιητές στη σωστή θέση.

2. Τοποθέτηση

- 1 Χαλαρώστε τελείως τον τροχό συμπίεσης (περιστροφή αριστερά).
- 2 Περάστε τον νάρθηκα από το πέλμα έως το γόνατο, σαν κάλτσα.
- 3 Ρυθμίστε τον ώστε το άνοιγμα να είναι ακριβώς γύρω από την επιγονατίδα και το μαξιλαράκι γέλης να την περιβάλλει.
- 4 Ελέγξτε ότι οι πλαϊνοί σταθεροποιητές βρίσκονται στα πλάγια του γόνατος και όχι μπροστά.
- 5 Με τον τροχό σφίξτε σταδιακά τη συμπίεση έως ένα ευχάριστο αίσθημα στήριξης.

Udoban oslonac u 3 koraka



1. NAVUCITE STEZNIK PREKO KOLJENA

Povucite steznik prema gore za siguran i udoban dosjed.

2. PORAVNAJTE GEL JASTUČIĆ

Postavite gel jastučić centrirano oko čašice koljena.

3. PRILAGODITE KOMPRESIJU

Okrenite kotačić kako biste prilagodili oslonac i stabilnost.

Τρία βήματα για σωστή εφαρμογή.



Precizni kotačić za kompresiju

Prilagodljiva kompresija i siguran dosjed


Silikonski grip protiv klizanja

Mekana silikonska tekstura sprječava klizanje i uvijanje.



Dvostruki bočni stabilizatori

Bočna stabilnost koljena

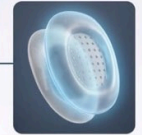

GEL jastučić za patelu

Rasterećenje pritiska i ublažavanje udaraca

Τροχός, πλαϊνοί σταθεροποιητές και μαξιλαράκι γέλης.

3. Ρύθμιση της συμπίεσης

- Αλλάζετε τη συμπίεση μέσα στην ημέρα: πιο σφιχτά στο περπάτημα, στις σκάλες και στην πολύωρη ορθοστάσια, πιο χαλαρά όταν κάθεστε και ξεκουράζεστε.
- Ένας σωστά σφιγμένος νάρθηκας **δεν μετακινείται** στο βάδισμα, ενώ η κνήμη διατηρεί φυσιολογικό χρώμα και θερμοκρασία.
- Ο τροχός γυρίζει και με τον νάρθηκα φορεμένο — δεν χρειάζεται να τον βγάλετε.



Οι πλαινοί σταθεροποιητές ακολουθούν την κάμψη του γόνατος.

4. Πόσο να τις φοράτε

- Πρώτες ημέρες: 2 – 3 ώρες την ημέρα, μέχρι να συνηθίσει το γόνατο.
- Στη συνέχεια: στις δραστηριότητες που επιβαρύνουν το γόνατο — περπάτημα, εργασία, προπόνηση, σκάλες.
- Μην τον φοράτε στον ύπνο.

5. Επίλυση προβλημάτων

Τι συμβαίνει	Αιτία	Λύση
Ο νάρθηκας γλιστράει προς τα κάτω	Πολύ ασθενής συμπίεση ή υγρό δέρμα	Σφίξτε κι άλλο τον τροχό· σκουπίστε το λάστιχο σιλικόνης με υγρό πανί για να επανέλθει η πρόσφυση

Τι συμβαίνει	Αιτία	Λύση
Μυρμήγκιασμα ή μούδιασμα στην κνήμη	Πολύ ισχυρή συμπίεση	Χαλαρώστε αμέσως τον τροχό· αν το αίσθημα δεν περάσει σε λίγα λεπτά, βγάλτε τον νάρθηκα
Το άνοιγμα δεν βρίσκεται γύρω από την επιγονατίδα	Ο νάρθηκας ανέβηκε πολύ χαμηλά ή είναι ανάποδη έκδοση L/R	Ελέγξτε την ένδειξη και μετακινήστε τον νάρθηκα ώστε το μαξιλαράκι να περιβάλλει την επιγονατίδα
Ο νάρθηκας ζαρώνει στην πίσω πλευρά του γόνατος	Πολύ μεγάλο μέγεθος	Πάρτε μικρότερο μέγεθος σύμφωνα με τον πίνακα βάρους

6. Πλύσιμο και φροντίδα

- Πλύσιμο στο χέρι στους 30 °C με ήπιο απορρυπαντικό, χωρίς μαλακτικό και χλωρίνη.
- Στεγνώστε στον αέρα, απλωμένο. Όχι σε στεγνωτήριο, καλοριφέρ ή ήλιο.
- Σκουπίζετε πού και πού το λάστιχο σιλικόνης με υγρό πανί, ώστε να διατηρεί την πρόσφυσή του.
- Κρατήστε τον τροχό και τους οδηγούς στεγνούς και καθαρούς από άμμο και σκόνη.

Το KneeFix είναι καθημερινή στήριξη, όχι ιατρική θεραπεία. Σε οξύ τραυματισμό, έντονο οίδημα, θερμό ή ασταθές γόνατο και μετά από χειρουργείο αποφασίστε για τη χρήση μαζί με τον γιατρό σας.

7. Εγγύηση, αλλαγή και επιστροφή

- 30 ημέρες για επιστροφή χρημάτων — στείλτε το προϊόν στην κατάσταση που το παραλάβατε.
- Δωρεάν αλλαγή μεγέθους εντός 90 ημερών. Αρκεί ένα e-mail, χωρίς χαρτούρα.
- Για αλλαγή ή επιστροφή γράψτε στο info@noriks.com και αναφέρετε τον αριθμό παραγγελίας.