

NORIKS ErgoSit — ορθοπεδικό μαξιλάρι καθίσματος

Εγκοπή για τον κόκκυγα και αφρός μνήμης υψηλής πυκνότητας για πολύωρο κάθισμα.

Αφρός	Αφρός μνήμης OrthoFlex υψηλής πυκνότητας
Πιστοποίηση	ΟΕΚΟ-TEX®, μη τοξικό
Σχήμα	Εγκοπή για τον κόκκυγα, ανατομική στήριξη για γοφούς και σπονδυλική στήλη
Κάλυμμα	Αφαιρούμενο, πλενόμενο στο πλυντήριο
Χρήση	Καρέκλα γραφείου, αυτοκίνητο, ταξίδια



ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- 1 μαξιλάρι ErgoSit
- Αφαιρούμενο πλενόμενο κάλυμμα

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

1. Βγάλτε το μαξιλάρι από τη συσκευασία και αφήστε το 24 ώρες ώστε ο αφρός να πάρει το πλήρες σχήμα του.
2. Τοποθετήστε το στην καρέκλα ώστε η εγκοπή να είναι πίσω, κάτω από τον κόκκυγα.
3. Καθίστε τελείως πίσω, με τα πόδια επίπεδα στο πάτωμα.

1. Πριν την πρώτη χρήση

- Το μαξιλάρι είναι συμπιεσμένο για τη μεταφορά — μετά το άνοιγμα αφήστε το 24 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου. Στο διάστημα αυτό ζυμώστε το αρκετές φορές με τα χέρια και τινάξτε το, ώστε ο αφρός να κατανεμηθεί.
- Η μυρωδιά του νέου αφρού φεύγει μετά από λίγες ώρες αερισμού.


2. Σωστή τοποθέτηση

- 1 Τοποθετήστε το μαξιλάρι στο κάθισμα ώστε η **εγκοπή να είναι πίσω** — κάτω από τον κόκκυγα, όχι μπροστά.
- 2 Το επίπεδο τμήμα του μαξιλαριού πρέπει να ακουμπά ολόκληρο στο κάθισμα, χωρίς να προεξέχει από την άκρη.
- 3 Καθίστε τελείως πίσω, ώστε η πλάτη σας να ακουμπά στην πλάτη της καρέκλας.
- 4 Ρυθμίστε το ύψος της καρέκλας ώστε τα γόνατα να είναι στο ύψος των γοφών ή λίγο πιο χαμηλά και τα πόδια επίπεδα στο πάτωμα.



Vozite diljem zemlje bez bolova
Testirali i odobrili vozači kamiona

Η εγκοπή αφαιρεί την άμεση πίεση από τον κόκκυγα.

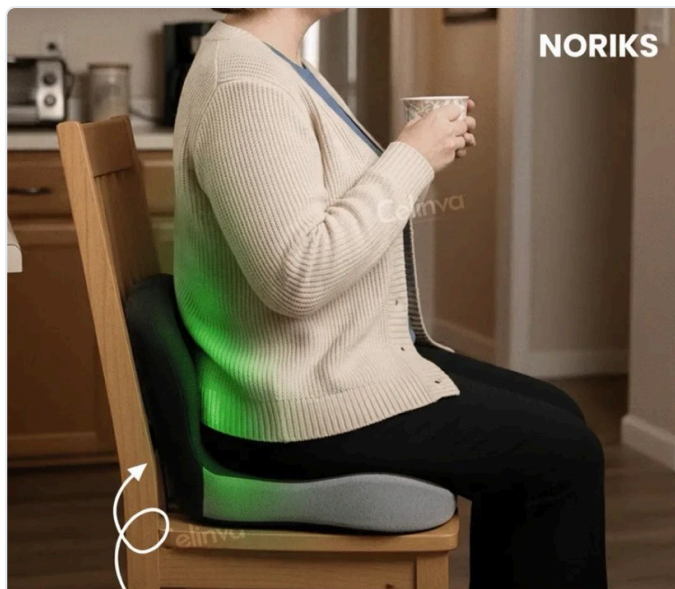

Automatski **ispravlja**
vaše **držanje**

Το ανατομικό σχήμα κατανέμει ομοιόμορφα το βάρος στους γοφούς.

3. Καθημερινή χρήση

- Το μαξιλάρι προορίζεται για καθημερινό κάθισμα — στο γραφείο, στο αυτοκίνητο και στα ταξίδια.
- Ακόμη και με το μαξιλάρι, σηκωθείτε και περπατήστε λίγα λεπτά κάθε ώρα.
- Μην το χρησιμοποιείτε σε πολύ μαλακές ή ανώμαλες επιφάνειες — χάνεται η στήριξη.

4. Επίλυση προβλημάτων

Τι συμβαίνει	Αιτία	Λύση
Το μαξιλάρι γλιστράει στην καρέκλα	Λεία ταπετσαρία καθίσματος	Γυρίστε το κάλυμμα με την αντιολισθητική πλευρά προς τα κάτω· σε δερμάτινες καρέκλες βάλτε από κάτω ένα λεπτό υπόστρωμα
Η πίεση στον κόκκυγα παραμένει	Η εγκοπή είναι στραμμένη μπροστά	Γυρίστε το μαξιλάρι — η εγκοπή πάει πίσω
Ο αφρός φαίνεται σκληρός	Κρύος χώρος	Ο αφρός μνήμης μαλακώνει στη θερμοκρασία του σώματος μέσα σε λίγα λεπτά
Το μαξιλάρι είναι πολύ ψηλό για το γραφείο	Μη ρυθμισμένο ύψος καρέκλας	Χαμηλώστε την καρέκλα κατά το ύψος του μαξιλαριού

5. Πλύσιμο και φροντίδα

- Βγάλτε το κάλυμμα και πλύνετε το στο πλυντήριο στους 30 °C, σε πρόγραμμα για ευαίσθητα.
- **Ποτέ μην πλένετε τον αφρό στο πλυντήριο και μην τον βυθίζετε σε νερό.** Σκουπίστε τους λεκέδες με υγρό πανί και αφήστε τον να στεγνώσει στον αέρα.
- Μη στεγνώνετε τον αφρό σε καλοριφέρ ή σε άμεσο ήλιο.
- Μη φυλάσσετε το μαξιλάρι συμπιεσμένο κάτω από βάρος — ο αφρός κρατά το σχήμα του μόνο χωρίς φορτίο.

6. Εγγύηση, αλλαγή και επιστροφή

- Επιστροφή ή αλλαγή μπορείτε να ζητήσετε εντός 30 ημερών από την παράδοση.

- Το προϊόν πρέπει να είναι αχρησιμοποίητο, άπλυτο και στην αρχική συσκευασία, με την απόδειξη.
- Τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν τον πελάτη — εκτός αν το προϊόν έφτασε χαλασμένο ή στάλθηκε λάθος είδος.
- Την επιστροφή χρημάτων κάνουμε σε PayPal ή IBAN, εντός 3 έως 5 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του δέματος.
- Για επιστροφή ή αλλαγή γράψτε στο info@noriks.com και αναφέρετε τον αριθμό παραγγελίας.

Αν το προϊόν φτάσει χαλασμένο ή με ελάττωμα κατασκευής, ενημερώστε μας αμέσως — τέτοια περίπτωση τη λύνουμε χωρίς κόστος για εσάς.

Το ErgoSit είναι μαξιλάρι καθημερινής στήριξης στο κάθισμα, όχι ιατρική θεραπεία. Δεν θέτει διάγνωση και δεν αντικαθιστά τη συμβουλή γιατρού. Αν οι ενοχλήσεις επιμένουν, εντείνονται ή εμφανιστούν μετά από τραυματισμό, απευθυνθείτε σε γιατρό.